


Provtagningsanvisningar

Sida 1 av 2: Provtagning vid blododling

Använd 2 st aeroba och 2 st anaeroba blododlingsflaskor

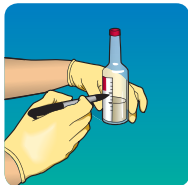

- Använd handskar
- Markera den volym blod som ska dras från patienten på flaskorna
Aerob/anaerob: **10 ml** blod
PED: **1-3 ml** blod



- Tvätta flaskornas gummimembran med klorhexidinsprit och låt lufttorka




- Tvätta huden med klorhexidinsprit och låt lufttorka


Provtagningsanvisningar

Sida 2 av 2: Provtagning vid blododling


Använd 2 st aeroba och 2 st anaeroba blododlingsflaskor

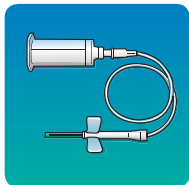

- Venpunktion görs men venprovtagningsset med slang (Safety Lok med hylsa)

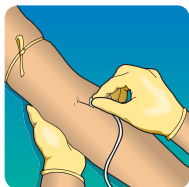

- Börja alltid med att ta ett slask rör (röret kan användas till kemiska analyser) och efter det den aeroba blododlingsflaskan

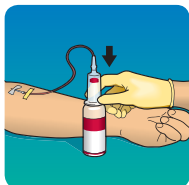

- Under provtagningen ska flaskan stå på plant underlag, så att man kan se när det är 10 ml blod.
- Flaskan ska ej fyllas med mer än 10 ml!

Blododlingen ska omedelbart transporteras till mikrobiologen!

BD AB
Marieviksgatan 25
117 43 Stockholm
Sweden

