



Söka röntgenbilder på specifik tand

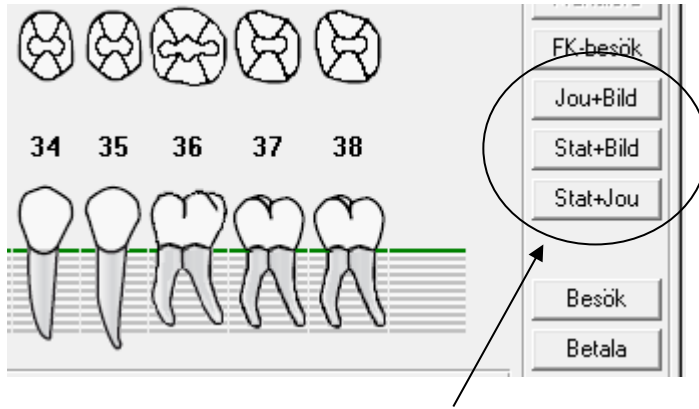

Genom att klicka på knapparna kan Du dela på Caritafönstret och se röntgenbilder på del av fönstret. Du får klicka två gånger på "Stat+Bild" för att det ska öppnas korrekt.

Stat+Bild

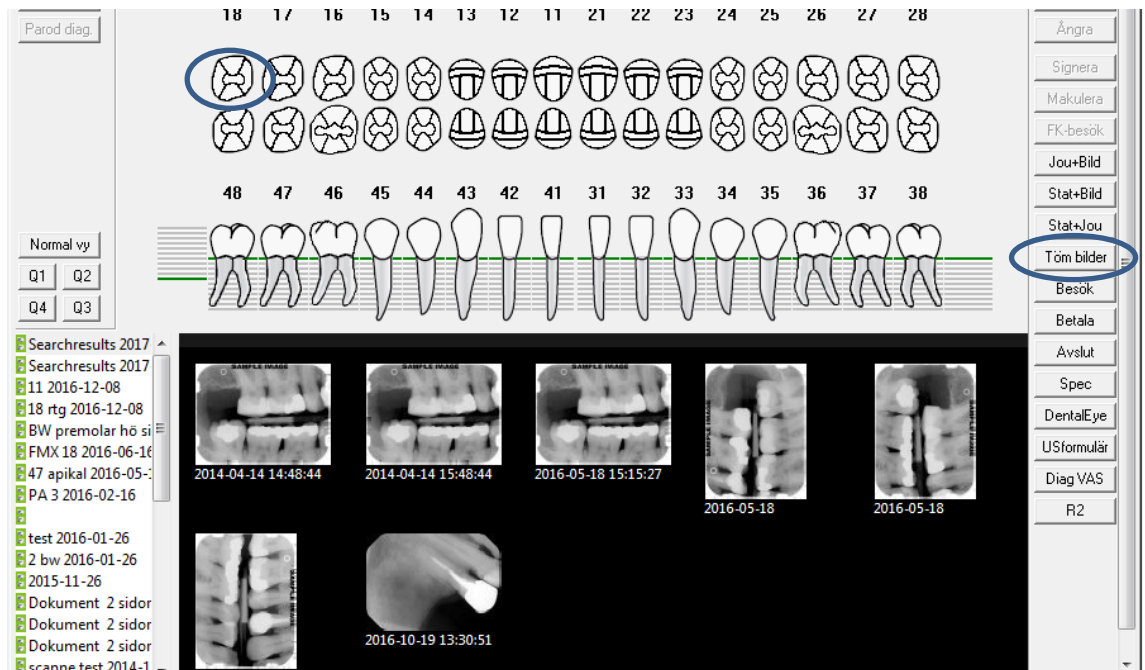

Genom att klicka på tandsymbolen i statusbilden, när du valt "Stat+Bild" så sorterar DentalEye fram samtliga bilder som finns på aktuell tand.

Rensa sökningen med knappen **Töm bilder**.

Jou+Bild

The screenshot displays the 'Jou+Bild' software interface. At the top, there are tabs for 'Status', 'Vårdbeskrivning', 'Terapiplan', 'Parod', 'Epidemiologi', and 'Dokument'. A list of image thumbnails is visible on the left, with the most recent one selected. The main window shows a dental X-ray image of a tooth, with a timestamp '2016-05-18 15:18:22' below it. To the right of the image are buttons for 'Ny', 'Öppna', 'Ändra', 'Spara', 'Ängra', 'Signera', 'Makulera', 'FK-besök', 'Jou+Bild', 'Stat+Bild', and 'Stat+Jou'. Below the image is a control panel with checkboxes for 'Utförd', 'Diagnos', 'Föregående', 'Planerat', 'Funktion', 'Automatisk', and 'Makulerat'. There are also buttons for 'Urval', 'Töm Urval', and 'Skriv'. At the bottom, there is a table with columns for 'Datum', 'Bhe', 'Sign', 'Termkod', 'Tand', 'Yta', 'E', 'I', 'D', and 'Vårdbeskrivning'.

Det senast tagna bildkortet visas och du kan växla bilder genom att klicka på de olika bildkortet.

Bilderna visas snabbt som miniatyrer – därav den mindre bra bildkvalitén. Dubbelklicka på önskad bild så öppnas den i större fönster där du kan justera ljus och kontrast.

För att registrera status måste du än så länge växla tillbaka till ”Stat+Jou”.