





Smittskydd
Region Norrbotten
2022-12-05

Patientinstruktion, klamydiaprovtagning för personer med slida

- 1) Ta ut provtagningspinnen ur skyddsförpackningen. Rör inte vid pinnens vita spets.

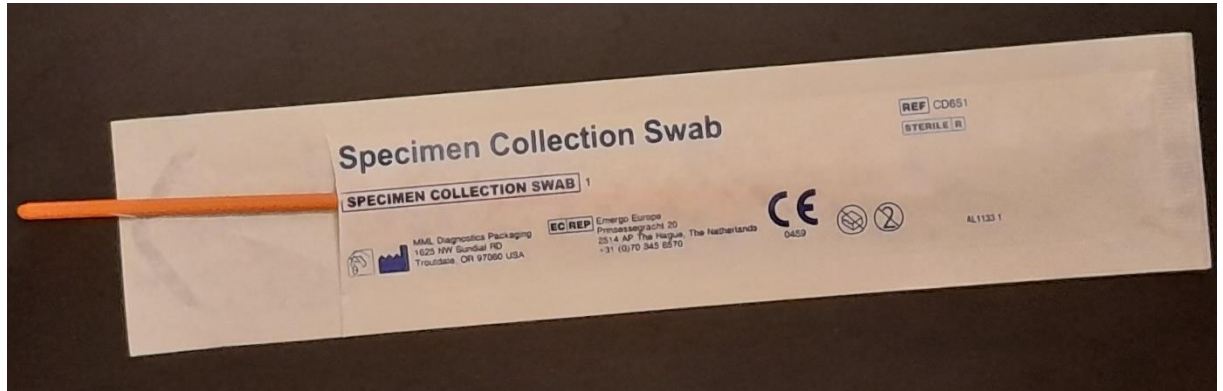

- 2) För in provtagningspinnen minst 5 cm i slidan med den vita spetsen först.

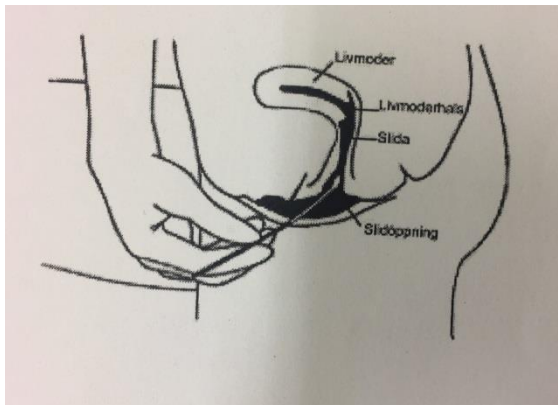

- 3) Roterar pinnen utmed slidans vägg i minst 15 sekunder.



Smittskydd
Region Norrbotten
2022-12-05

- 4) Ta fram provtagningsröret. Skruva av korken. Häll inte ut vätskan som finns i röret.



- 5) Sätt ned pinnen i provtagningsröret och bryt av skaftet vid markeringen.



- 6) Sätt på korken och vänd röret 3-4 gånger så att innehållet blandas.
- 7) Lämna provtagningsröret till personal på mottagningen.