

# Depurationsinstrument

## Berörda enheter

Allmäntandvården, Specialisttandvården, Käk- och munsjukdomar,  
Privattandvården

## Syfte

Skapa infektionskontroll vid parodontit och gingivit.

## Val av instrument

### Vilket instrument man väljer beror på olika faktorer:

- Skadans omfattning
- Tandens placering i munnen
- Tandens och rotens form
- Praktiska funktioner som arbetsställning, vilken man anpassar till den del av munnen man arbetar i.

### Välj instrument som är:

- Lätta att greppa och inte glider i handen
- Utformade för att komma åt alla ytor som skall behandlas
- De ska även behålla sin skärpa under hela behandlingsgången.
- Det är lämpligt med ett fåtal men väl valda instrument. Begränsa dig till vad du behöver. Då blir det inte så många onödiga avbrott för instrumentbyte under behandlingsarbetet. Det är både praktiskt och kostnadseffektivt

### Parodinstrument på vår bricka:


Ficksond Hu-Friedy 3-6-8-11

Kyretter:

Gracey 11-12 (LM 211-213 XSi)



Gracey 13-14 (LM 213-214 XSi)

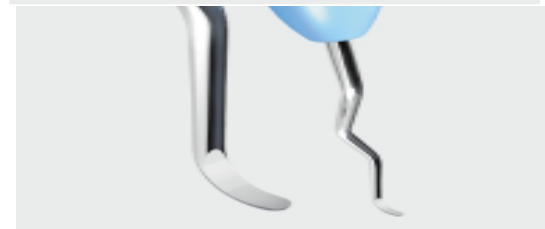

Huvudprocess Tandvård; Parodontologi	Ansvarig Angelika Lantto	Processledare Konstantin Sarkissov	Sida 1 av 3
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id CAREACTDEN-3-75	Godkänt datum 2024-01-29	Version 7.0

Goldman Fox nr 3 (LM 233-234 XSi)



### Minikyretter

De har mindre arbetsdel och är ett komplement till ordinarie kyretter. Lämplig för bättre åtkomlighet i djupa fickor > 6mm.

Gracey 11-12  
(LM 211-212 XSi M)




Gracey 13-14  
(LM 213-214 XSi M)




### Varför ska instrumenten slipas?

- De avlägsnar biofilmen och tandsten effektivare
- Risken för onödiga skador i vävnad minskar
- Arbetet blir mer effektivt och mindre kraft används vid varje arbetsmoment

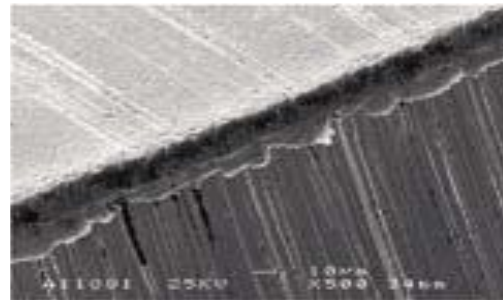

### Kontrollera eggens skärpa!

- Titta på den under god belysning. En vass egg syns liksom en osynlig gräns mellan de båda arbetsytorna.
- Testa eggen, mot ex en plast stav. Ett tunt spån skall bildas om eggen är vass.
- Granska det gärna under god belysning och förstöringsglas (max 2-5ggr förstoring)

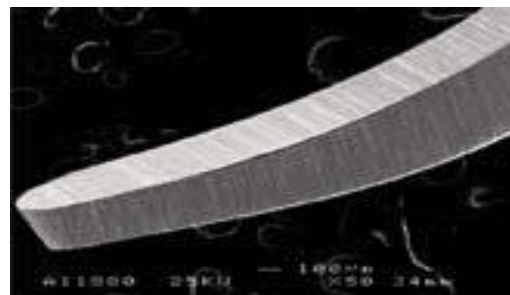

Huvudprocess Tandvård; Parodontologi	Ansvarig Angelika Lantto	Processledare Konstantin Sarkissov	Sida 2 av 3
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id CAREACTDEN-3-75	Godkänt datum 2024-01-29	Version 7.0

### Att skärpa instrument

- Skärp efter varje behandling
- Gör det själv! Det underhåller kunnandet och ökar motivationen till att göra det bra!



### Tips på rutiner i sterilen!

- De kyretter som används vid subgingival rengöring bör slipas efter varje användning
- Ha individuellt märkta parodbrickor
- Efter att instrumenten har diskats slipas dem för att läggas i bricka för att steriliseras

<b>Huvudprocess</b> Tandvård; Parodontologi	<b>Ansvarig</b> Angelika Lantto	<b>Processledare</b> Konstantin Sarkissov	<b>Sida</b> 3 av 3
<b>Dokumenttyp</b> Vårdrutin	<b>Dokument-Id</b> CAREACTDEN-3-75	<b>Godkänt datum</b> 2024-01-29	<b>Version</b> 7.0